

**OLYMPUS**<sup>®</sup>

Your Vision, Our Future

Endo**Therapy**<sup>™</sup>

Одноразовые биопсийные щипцы

**EndoJaw**<sup>™</sup>

Расширенная линейка для получения материала высокого качества



# Когда речь идет об эндоскопической биопсии, ничто не сравнится с OLYMPUS

OLYMPUS, бесспорный лидер в производстве эндоскопов, предлагает широкий ассортимент одноразовых биопсийных щипцов EndoJaw, отличающихся прекрасной режущей способностью для получения высококачественного биоптата и полной совместимостью с эндоскопами OLYMPUS для уверенности в каждом движении.

## Полная продуктовая линейка

Доступны различные вариации, включая модели с браншами типа «Аллигатор» и версии с иглой, а также широкий выбор биопсийных щипцов для эндоскопов с различными диаметрами инструментального канала: 2,0 мм, 2,8 мм, 3,2 мм и 3,7 мм.



Тип «Аллигатор с иглой»  
3,7 мм



Тип «Аллигатор»  
3,2 мм




Тип «Овальные бранши с иглой»  
2,8 мм



Тип «Овальные бранши»  
2,0 мм

## Двухэтапное лезвие для срезания краев биопсийного материала

Биопсийные щипцы EndoJaw имеют уникальный двухступенчатый дизайн лезвия: более тонкий режущий край для легкого разреза и более толстую основную часть, которая придает инструменту прочность и надежность.

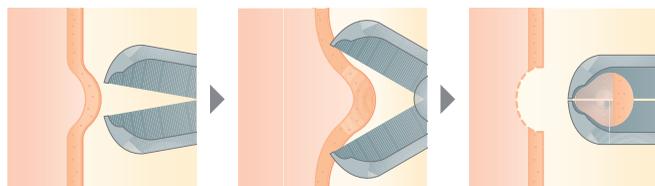

## Легкий ввод в канал эндоскопа

Все модели EndoJaw оснащены оболочкой, которая имеет низкий коэффициент трения, что обеспечивает плавное введение инструмента и не травмирует канал эндоскопа. Щипцы обладают большей гибкостью, благодаря которой они могут с легкостью проходить даже через сильно изогнутый эндоскоп, не травмируя инструментальный канал.

## Безопасность для Вашего эндоскопа

Накопленный опыт компании Olympus в производстве эндоскопов и знание всех конструктивных особенностей инструментального канала позволяет создавать качественный, надежный и безопасный инструмент. Благодаря особенному строению щипцов достигается полная совместимость с эндоскопом, что позволяет свести к минимуму повреждение инструментального канала Вашего эндоскопа.

## Конструкция из нержавеющей стали

Чашечки щипцов EndoJaw изготовлены из нержавеющей стали для оптимальной точности.



## Качающиеся бранши для прицельной биопсии

Механизм SwingJaw «Качающиеся бранши» щипцов EndoJaw упрощает позиционирование чашечек щипцов в зоне биопсии, а также обеспечивает тангенциальный подход, что значительно облегчает взятие биопсии.



# ОДНОРАЗОВЫЕ БИОПСИЙНЫЕ ЦИПЦЫ

## Спецификация

### Для гастроскопии

Обозначение	Минимальный диаметр рабочего канала	Особенность		Количество	Рабочая длина	Цвет оплетки
FB-210K.A	2,8 мм	тип «Аллигатор»	—	20 шт/уп	1550 мм	Серый
FB-220K.A			с иглой			
FB-230K.A		тип «Овальные бранши»	—			
FB-240K.A			с иглой			
FB-211K.A	2,0 мм	тип «Аллигатор»	—			
FB-221K.A			с иглой			
FB-231K.A		тип «Овальные бранши»	—			
FB-241K.A			с иглой			

### Для колоноскопии

Обозначение	Минимальный диаметр рабочего канала	Особенность		Количество	Рабочая длина	Цвет оплетки
FB-210U.A	2,8 мм	тип «Аллигатор»	—	20 шт/уп	2300 мм	Голубой
FB-220U.A			с иглой			
FB-230U.A		тип «Овальные бранши»	—			
FB-240U.A			с иглой			
FB-214U	3,2 мм	тип «Аллигатор»	—	20 шт/уп		
FB-224U			с иглой			
FB-234U		тип «Овальные бранши»	—			
FB-244U			с иглой			
FB-212U*	3,7 мм	тип «Аллигатор»	—	5 шт/уп		
FB-222U*			с иглой			
FB-232U*		тип «Овальные бранши»	—			
FB-242U*			с иглой			

\* Могут отсутствовать в некоторых регионах.

### Для бронхоскопии

Обозначение	Минимальный диаметр рабочего канала	Особенность		Количество	Рабочая длина	Цвет оплетки
FB-211D.A*	2,0 мм	тип «Аллигатор»	—	20 шт/уп	1150 мм	Зеленый
FB-221D.A*			с иглой			
FB-231D.A*		тип «Овальные бранши»	—			
FB-241D.A*			с иглой			

\* Могут отсутствовать в некоторых регионах.

По вопросам покупки инструмента, пожалуйста, обращайтесь к представителям в своем регионе:

Россия:

– Москва +7 916 757 88 61

– МО и ЦФО +7 916 757 88 74

– Санкт-Петербург и СЗФО +7 981 833 18 68

– ПФО +7 910 108 00 68

– УФО +7 912 659 37 77

– СФО +7 913 793 62 62

– ДФО +7 913 793 62 62

– ЮФО +7 988 369 97 85

– СКФО +7 988 369 97 85

Украина: +380 50 440 55 35

Казахстан: +7 702 741 05 16

Страны СНГ: +380 44 594 48 01

По вопросам обучения методике, пожалуйста, обращайтесь по телефону: +7 495 735 45 78, доб. 1210

**OLYMPUS**

107023 Москва, ул. Электrozаводская, д. 27, стр. 8  
Телефон: +7 (495) 730-21-57, факс: +7 (495) 663-84-86  
www.olympus.com.ru